

VITAMMY®

bunny

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Model TB8220

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej VITAMMY BUNNY (TB8220).

korzystać z urządzenia.

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupyony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie

△ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA


Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- △ Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- △ Nie wkładaj baterii do ognia, nie zwieraj jej biegunów.
- △ Nie ładuj baterii, która nie jest akumulatorem.
- △ Należy ściśle przestrzegać instrukcji umieszczonej na bateii.
- △ Nie używaj baterii do ponownego ładowania (akumulatorków).
- △ Przed wymianą baterii wyłącz szczoteczkę i osusz jej obudowę. Następnie włóż nową baterię zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- △ Zużyta baterię należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- △ Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez pół miesiąca lub dłużej, wyjmij z niej baterię.
- △ Nie używaj baterii, której termin przydatności upłynął.
- △ Chronić szczoteczkę przed upadkiem i uderzeniami.
- △ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach psycho-motorycznych jedynie po dokładnym instruktażu dotyczącym bezpiecznego posługiwania się tym urządzeniem i po zrozumieniu związanych z jego użytkowaniem ryzyk. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- △ To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby

niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.

- △ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- △ Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- △ Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- △ Skonsultuj ze swoim stomatologiem, czy możesz bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jesteś po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- △ Na początku używania szczoteczki może pojawiać się krwawienie z dziąseł. Jeśli nie ustąpi po tygodniu stosowania szczoteczki, skonsultuj to z lekarzem.
- △ Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem szczoteczki.
- △ Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- △ Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- △ Zachowaj instrukcję na przyszłość.




OPIS URZĄDZENIA

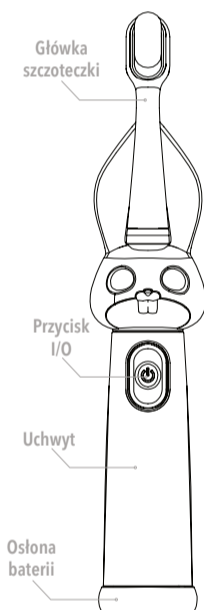


PRZED UŻYCIEM

ZAINSTALUJ BATERIĘ

1. Za pomocą załączonego śrubokręta krzyżakowego poluzuj śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii. Nie wykręcaj śrubki do końca, żeby jej nie zgubić.
2. Przekręć osłonę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie zdejmij pokrywę baterii z uchwytu.

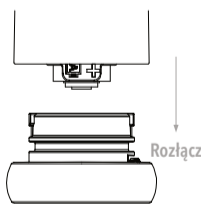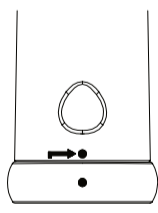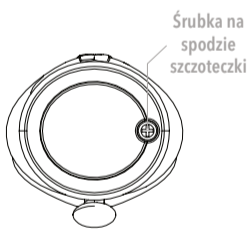


3. Włóż baterię do przedziału na baterię zgodnie z oznaczoną polaryzacją.

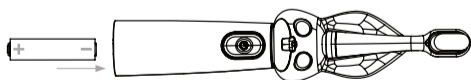

4. Nasuń osłonę baterii na uchwyt, a następnie przekręć zgodnie z uchem wskazówek zegara. Następnie zabezpiecz osłonę baterii dokręcając śrubkę śrubokrętem krzyżakowym.

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

1. Załóż główkę szczoteczki zgodnie z rysunkiem:

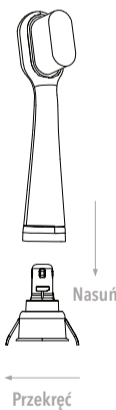

2. Przekręć główkę szczoteczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by zabezpieczyć ją przed zsunieniem.
3. Aby zdjąć główkę szczoteczki (np. by ją wymienić na nową) postępuj w odwrotnej kolejności – najpierw przekręć główkę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdejmij główkę z uchwytu szczoteczki.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Nałóż pastę do zębów na **wyłączoną** szczoteczkę.
2. Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
3. Włącz szczoteczkę przyciskiem I/O, i zacznij myć zęby.
- △ UWAGA! Nie przyciskaj przycisków paznokciem, bo możesz w ten sposób uszkodzić gumę.

4. Zaleca się myć zęby przez 2 minuty. Po upływie 30 sekund szczoteczka robi krótką przerwę by przypomnieć o zmianie miejsca szcztokowania.
5. Po upływie 2 minut szczoteczka wyłączy się automatycznie.
6. Następnie oplucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki, osusz uchwyt ręcznikiem.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- △ Przed czyszczeniem upewnij się, że pokrywa przedziału baterii jest dobrze zamknięta.
- △ Oplucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
- △ UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie.
- △ Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących.

- △ Nigdy nie zdejmuj pokrywy przedziału na baterię przed czyszczeniem całego urządzenia.
- △ UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókniny stalowej.

Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Prąd stały		Importer
	Data produkcji		Oznaczenie do kontaktu z żywnością
	Numer seryjny		Podwójna izolacja
	Stosować się do dyrektywy WEEE 2012/19/UE: Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Uchwyt szczoteczki VITAMMY BUNNY (TB8220)
2. 1 główka szczoteczki
3. 1 bateria AAA
4. 1 śrubokręt krzyżakowy
5. Instrukcja używania

GWARANCJA

Urządzenie	VITAMMY BUNNY (TB8220)	
Gwarant	Novamed.pl S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź	
Wsparcie techniczne	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl	
Gwarancja	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni .	
Typ gwarancji	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.	
Okres gwarancji	24 miesiące na urządzenie Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: końcówka szczoteczki, bateria.	
Bieg okresu gwarancji	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.	
Obszar bowiązywania gwarancji	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.	
Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.	
Warunki ważności gwarancji	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.	
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.) Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.	
Pieczęć i podpis sprzedawcy	Data	Podpis klienta

INFORMACJE KONTAKTOWE

 **Novamed.pl S.A.**
Traktorowa 143, 91-203 Łódź, Poland
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

 **Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.**

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China



Wyprodukowano w Chinach / Made in China

Wersja / Version: 01.01 / 2022-11-23