



neno[®]

sano
nebulizator
kompresorowy

dla
dzieci
i dorosłych

2
sposoby
nebulizacji



wyrób
medyczny



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



Długi przewód

W przypadku dzieci i osób starszych inhalacja bywa szczególnym wyzwaniem. Neno Sano został wyposażony w długi przewód łączący urządzenie z pojemnikiem na lek. Jego wymiary pozwalają na swobodę ruchu najmłodszym domownikom, którzy nie potrafią usiedzieć w miejscu dłużej niż kilka minut. To także gwarancja wygody dla osób starszych. Mogą one umieścić nebulizator kompresorowy na stoliku i zająć przed rozpoczęciem inhalacji wygodną pozycję na krześle lub na kanapie.



150 cm





dla dzieci



dla dorosłych



Dwie maseczki w zestawie

Zdajemy sobie sprawę, że choroby układu oddechowego to częsty problem całej rodziny, dlatego wyposażyliśmy nasz nebulizator pneumatyczno-tłokowy w dwie maseczki. Jedna z nich jest przeznaczona dla dorosłych, a druga dla dzieci. Takie rozwiązanie zapewnia małym i dużym dostęp do możliwości łagodzenia objawów infekcji o każdej porze roku.

Dwa sposoby nebulizacji

Jak na nowoczesny produkt przystało, Neno Sano oferuje użytkownikom i użytkowniczkom możliwość przeprowadzenia spersonalizowanej inhalacji o wysokiej skuteczności. Frakcja respirabilna nebulizatora wynosi 76%, co oznacza, że urządzenie produkuje dużą ilość cząsteczek docierających w głąb układu oddechowego. Najbardziej odpowiedni dla siebie sposób nebulizacji możesz odkryć, korzystając z dołączonego do zestawu ustnika lub maseczki.



**Duży
pojemnik**

na lek




8 ml



Czasami inhalacja to jedyna droga do złagodzenia przewlekłego zapalenia zatok lub przebiegu wyjątkowo ostrego przeziębienia. Podczas długich sesji nebulizacyjnych bardzo pomocny będzie duży pojemnik na lek, którego zawartość Neno Sano przekształca w cząsteczki o wielkości $5\mu\text{m}$, charakteryzujące się wysoką wchłanianością.

Wyrób *medyczny*

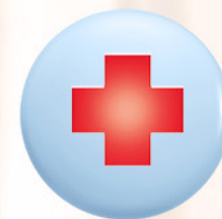

Neno Sano to nebulizator pneumatyczno-tłokowy, który stanowi wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Łatwe **czyszczenie**

Jesteśmy przekonani, że pokochasz Neno Sano za funkcjonalność oraz...łatwość czyszczenia zapewniającą oszczędność czasu. Jedyne, co musisz zrobić po każdym użyciu, to umyć, osuszyć i odłożyć pojedyncze elementy nebulizatora w bezpieczne miejsce.





2x
wymienny
filtr
w zestawie


Wymienne elementy

Czy wiesz, co jest podstawą udanej inhalacji? Zachowanie właściwej higieny! Do każdego egzemplarza Neno Sano dołączyliśmy 2 filtry odpowiedzialne za przechwytywanie zanieczyszczeń obecnych w zasysanym powietrzu. Dzięki ich regularnej wymianie nie musisz martwić się, że Twoich płuc dostaną się pyły, w tym kurz.

Łatwa obsługa



Ogromną zaletą nebulizatora kompresorowego jest prosta i szybka obsługa. Za uruchomienie odpowiada jeden przycisk, a całe urządzenie to tak naprawdę kilka części, które jesteś w stanie szybko złożyć. Efekt, jaki zyskujesz, to rozpoczęcie inhalacji w przeciągu kilku minut.

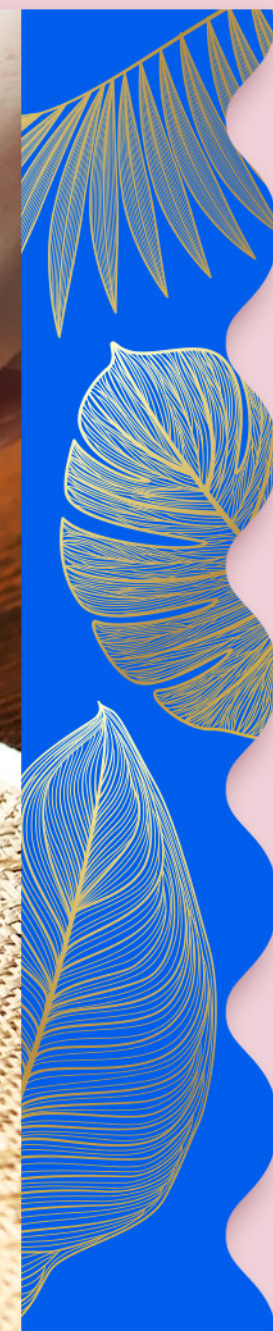

Stabilna *podstawa*



Stabilna pozycja urządzenia to podstawa, zwłaszcza podczas częstego użytkowania. Produkt posiada 5 antypoślizgowych nóżek, które zapewniają stabilne przyleganie do powierzchni.

Niewielki i lekki – to dwa określenia wyróżniające Neno Sano spośród innych nebulizatorów pneumatyczno-tłokowych dostępnych na rynku. Poza tym, że łatwo go przenieść lub zabrać ze sobą w podróż, wpada w oko ze względu na minimalistyczny i nowoczesny design.

design

*Nowoczesny
i funkcjonalny*



ciche urządzenie

52
dB

Neno Sano zalicza się do wyjątkowo cichych nebulizatorów kompresorowych. Dzięki delikatnym dźwiękom, które wydaje, możesz używać go w miejscach publicznych i nie martwić się, że zakłóci spójność otoczenia.

neno



sano

NAGRODY DLA FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
Pojemność pojemnika na lek:	≤8ml
Długość przewodu powietrznego:	150cm
Ilość masek:	1x dla dziecka; 1x dla dorosłego
Końcówka do ust:	tak
Wydajność aerozolu:	≥ 0,20 ml/min
MMAD (średnia wielkość cząsteczki aerozolu):	ok. 5µm
Zakres ciśnienia pracy:	20kPa-80kPa (2,9psi-11,7psi)
Poziom hałasu:	≤ 52Db
Fracja respirabilna:	FR ≥76%
Zapasowy filtr powietrza:	tak, 2 szt
Czas zabiegu:	25min, 40 min przerwy
Temperatura przechowywania:	-20 – 50°C
Ciśnienie atmosferyczne przechowywania:	700-1060hPa
Dopuszczalna wilgotność powietrza:	30 – 85% RH
Objętość martwa (rezydualna):	≤0.7ml
Waga nebulizatora:	315g
Wymiary nebulizatora:	144x78x67mm
Waga i rozmiar pudełka:	0,63kg, 162x147x91mm
Gwarancja:	2 lata, door to door
Kod EAN:	5902479673943
Kod PN	NEN-MAM-INH004
Kod CN:	90192090

